

BIOMÉRIEUX

VIDAS[®] KUBE[™]

Enter a World of Simplicity

TRUSTED. ROBUST. UNIVERSAL.



PIONEERING DIAGNOSTICS

VIDAS® KUBE™

간편하고 자동화된 식품 분석

식품 검사에 대한 요구사항은 나날이 증대되고 있습니다. 제품을 보다 신속하게 출시하고 제조 환경을 보호하기 위해서는 정확한 결과를 적시에 제공해야 합니다.

VIDAS® KUBE™와 함께 간편함의 신세계를 경험해보세요. 비용 효율적인 자동화 시스템을 통해 완벽한 신뢰성으로 신속한 결과를 제공합니다.

VIDAS® KUBE™는 쉽게 확장 가능하며, 변화하는 실험실 환경에서 간단하고 신뢰할 수 있는 추가 사항입니다!

Full HD
TOUCHSCREEN



간편한 구현

VIDAS® KUBE™ 설치의 간단하며, 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 실험량의 유연성 - 한 번에 12에서 72 샘플까지
- 최대 6개의 기기 까지, 공간 절약을 위한 적재형 벤치탑 디자인
- 최소 교육 및 설치 요구 사항
- 최대 2개의 모듈까지 통합된 PC 지원

결과에 대한 신뢰도 향상

VIDAS® KUBE™는 실험실이 항상 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 얻을 수 있도록 보장합니다.

- 온보드 Strip & SPR® 호환성 검증
- 광학 샘플 감지
- 자동 경고: 누출, 막힘, 판독
- 모듈 간 공유 보정 (Shared Calibration)

VIDAS® KUBE™는 다음과 같은 기능을 통해 사용자가 쉽게 채택할 수 있도록 지원합니다:

- 직관적이고 사용하기 쉬운 소프트웨어 인터페이스
- 양방향 연결 및 CONNECT-UP™ 지원
- 사이버 보안을 통한 데이터 보호
- 완벽한 추적성(21CFR*, Audit trail)

* Code of Federal Regulations
** Quality Control VIDAS® ***
VIDAS® Run Control

기기 LED

2개의 독립적인
6개 테스트 섹션



전원 버튼

섹션 작동 상태 표시등

인정받는 고품질 서비스

VIDAS® KUBE™는 장기적으로 안심하고 사용할 수 있습니다.

- 진화하고 적응 가능한 교육 과정
- 유지 보수 및 제어 감소(QCV** 또는 VRC*** 불필요)
- VILINK® 원격 유지 관리를 통한 가동 시간 증가
- 우수한 자격을 갖춘 엔지니어로 구성된 전 세계 팀

VIDAS® KUBE™

발전하는 실험실에는 현재와 앞으로의 테스트 볼륨을 쉽게 처리할 수 있는 진보된 식품 테스트 솔루션이 필요합니다.

VIDAS® KUBE™의 적응형 자동화 기능을 통해 실험실의 생산성과 정확성을 높이고 혁신적인 올인원 단순화 플랫폼을 구현할 수 있습니다.



VIDAS® CONCEPT INSIDE


UNIQUE SINGLE TEST CONCEPT

- ◆ 장기 보관이 가능한 Ready to use 시약
- ◆ All-in-one kit



13가지 식품 분석을 포함한 다양한 루틴 테스트 메뉴

- ◆ ISO, AOAC 검증
- ◆ 다양한 식품 및 환경 매트릭스, 당일 및 익일 프로토콜

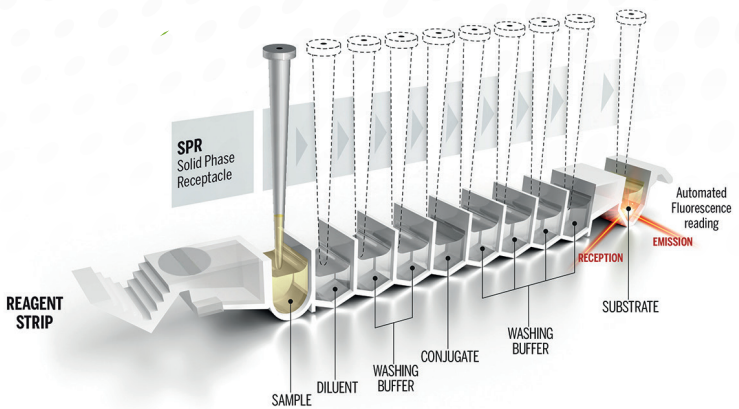

*자세한 내용은 담당자에게 문의해주시기 바랍니다.

THE WORLD OF VIDAS®


여러분이 자동화를 처음 접하건, 혹은 최신 기술을 도입하건 관계없이, 저희는 여러분의 **발전하는 실험실** 요구사항을 잘 이해하고 있습니다.

여러분의 실험실을 지속적으로 운영할 수 있도록 도와주는 우수한 서비스와 함께 **간편하면서도 견고한 솔루션**에 대한 니즈를 잘 알고 있습니다.

VIDAS® KUBE™는 **최고 수준의 기술**을 활용하면서도 식품 실험실에서 인정받은 VIDAS® 솔루션의 장점은 그대로 유지합니다.

비오메리으와의 파트너십을 통해 면역 분석 분야에서 **30년 이상 축적된 경험**을 얻으실 수 있습니다.

3세대에 걸친 혁신

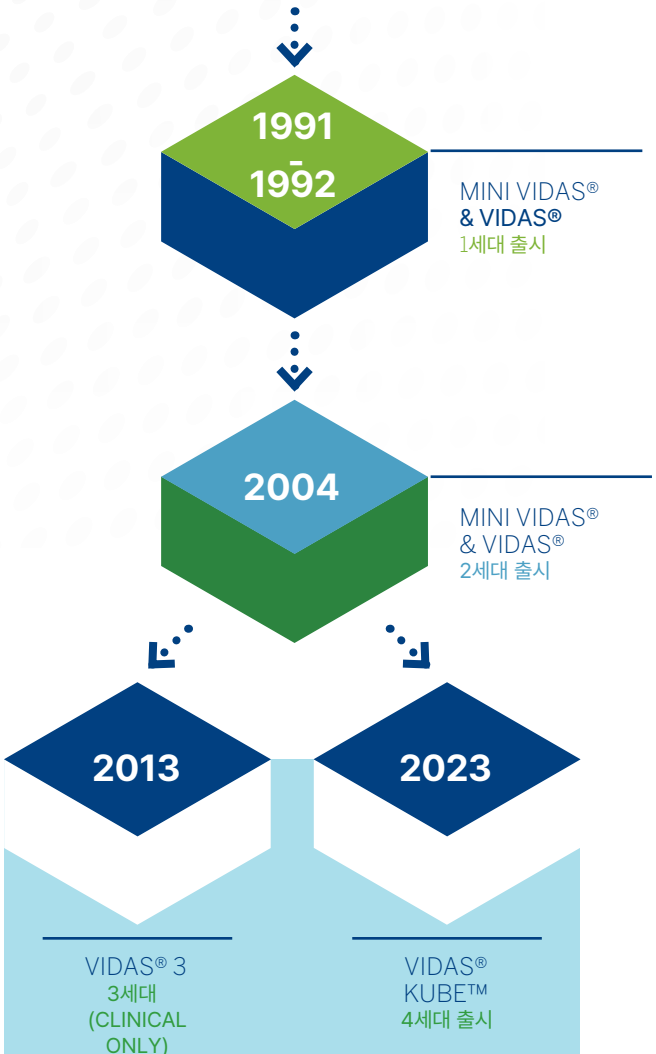



제품 사양

VIDAS® KUBE™ References	423 905 (single unit) 470 7556 (standard configuration)
무게 (Single Unit - Kg / Lb)	23.7 // 52.25
부피 (Single Unit - cm / inch)	43.4 / 32.1 / 48.5 // 17.08 / 12.63 / 19.09
전압	100/240 V, 56-60Hz
전력	150 W
Energy efficient	Sleep mode; Programmable morning start up
작동 온도	18-30°C
작동 습도	20-80% relative humidity non-condensing
최대 고도	2700 m
작동 시 소음	≤ 70 dBa
사용적합성 기준	<ul style="list-style-type: none"> • Data purge: Automatic data archiving • User safety during testing: Auto-locking of section doors • Calibration setting: Modifiable

PC specifications

VIDAS® KUBE™를 3개에서 최대 6개의 모듈로 구성하기 위해서는 추가 PC가 필요합니다.

OS 구성	Windows 10
CPU	Intel Core i3 – 8100 3.6 GHz
Memory	27000 tests results Approx. 5 years of data
RAM	DDR4 - 16GB 2400 MHz
Connectors	USB port x 6 Ethernet port x 1 Display port (screen) x 1